

Wheel Blades

Wheel Blades er små ski i høy kvalitet, som med et enkelt klikk monteres på svingjulene til rullestoler, barnevogner og rullatorer, slik at mobiliteten blir dramatisk forbedret ved bruk på is og snø.




Uansett hvor ung eller gammel, aktiv eller passiv du er: Wheel Blades gir deg mer frihet og en ny følelse av mestring. Den brede kontaktflaten til skiene fordeler trykket fra brukeren jevnt utover underlaget, og motvirker at de små svingjulene synker ned i snøen. Skiene sklir over underlaget med veldig lite trykk og har ingen problemer med å forsere ujevne deler med snø og is. For å få skiene til og alltid bevege seg i ønsket retning, er bindingene montert foran på skiene. Uansett hvor du vil kjøre – så vet skiene veien.

To dype spor på skienes underside komprimerer snøene og sikrer stabilitet, slik at man kjører etter faste «skinner» i snøen. Wheel Blades er ekstremt lette i vekt og det tar bare et par sekunder å montere dem på alle vanlige typer svingjul.

Den justerbare bindingen dekker alle hjulbredder fra 1,8 til 7 cm. Som man fort vil oppdage, så fungerer Wheel Blades ekstremt enkelt. Enkelt men med mange fordeler. Alt dette tilsvarer det faktum at med Wheel Blades vil kjøring på snø tilsvare kjøring på asfalt eller lignende underlag. Man slipper å balansere stolen eller vognen på bak-/drivhjulene.

Wheel Blades gjør det også enklere for ledsagere å dytte stolen/vognen fremover. Wheel Blades er tilgjengelig i standard størrelse, tiltenkt bruk på rullestoler, og i størrelse XL, som er spesielt utviklet for bruk på barnevogner og lignende.

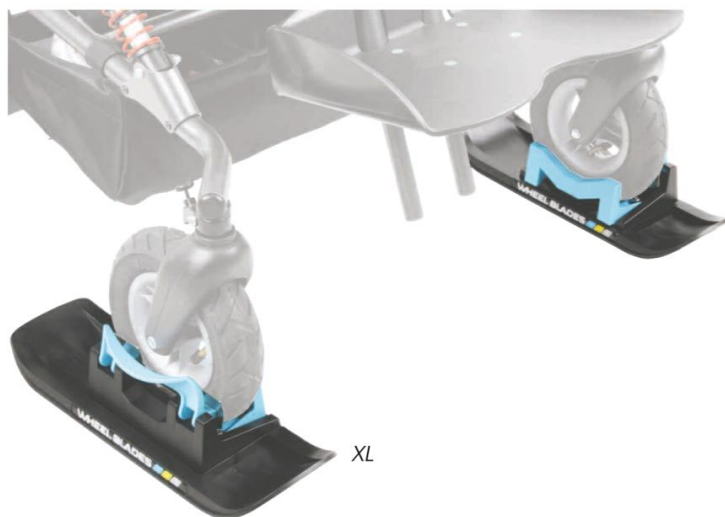

Artikkelnr.	HMS nr.	Navn
481 S00=SK090	192201	Wheel Blades standard
471 S00=SK050	199999	Wheel Blades str. XL