

Aktivitetshjelpemidler for barn, unge og voksne

Freak liggesykkel m/hjelpemotor

September 2016



Freak liggesykkel er en spesialutviklet for brukere under 165cm.

Dimensjonene og den optimale vektfordelingen gir Freak veldig gode kjøreegenskaper. Gir- og bremsekomponenter av høy kvalitet sikrer nøyaktig bytting av gir og sikker bremsing.

Enkel regulering av sete og rygg gir bruker en optimal sittestilling. Ryggvinkelen kan justeres trinnløst uten verktøy. På den måten kan den raskt og enkelt tilpasses dine behov når du er ute på tur.


Enkelt demontering: Kjøreenheten og chassiset kan enkelt tas fra hverandre ved hjelp av quick-lock systemet uten bruk av verktøy. Videre tas bakhjulene av med quick-release. På denne måten tar den liten plass ved transport.

Sykkelen leveres med hydrauliske bremses på for- og bakhjul som standard.

Freak leveres med et stort tilbehørssortiment.



Freak liggesykel m/hjelpemotor

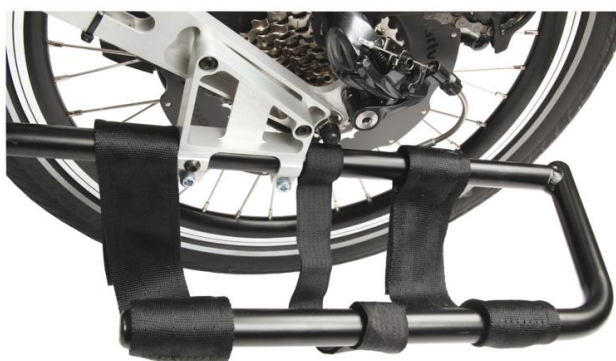

Teknisk informasjon

- Vekt: 14,8 kg
- Brukervekt: Max. 100 Kg
- Cambring: 1°, 4° eller 6°
- Setehøyde: 13 cm
- Total lengde: 180 cm
- Total bredde: 53,5 cm
- Delt mål, chassis: 102x46x37 cm
- Delt mål, styreenhet: 99x43x51 cm
- Girsystem: Shimano
- Hjelpemotor: BionX eller NeoDrive



Aktivitetshjelpemidler for barn, unge og voksne

Handinor AS - Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Tel.: 63 88 72 40 - Telefaks: 66 81 60 71
post@handinor.no - www.handinor.no