

Aktivitetshjelpemidler for barn, unge og voksne

xRover joggevogn

2017



xRover joggevogn er CE-merket.

Neste generasjons joggevogn

xRover er en joggevogn som er laget med tanke på å kunne tilby en mer aktiv livstil enn det vanlige joggevogner gjør. xRovers utforming gjør at bruker sitter lavt og sikrer et lavt tyngdepunkt på vognen. Det er cambring på bakhjulene for å gjøre vognen lettere å trille i høyere hastigheter (ved for eksempel joggeturer), og holde den stabil i svinger. xRover finnes i tre størrelser for å kunne dekke brukerstørrelser opp til 185 cm.



Joggevognen har en helsveiset ramme, som er forsterket i alle hjørner og bøyer. Ettersom brukeren sitter inne i rammen, er brukeren godt sikret i forhold til en kollisjon eller lignende.

Framhjulet til vognen kan justeres slik at setetilten kan økes eller minskes i forhold til hvilken vinkel hjulet plasseres i.

Sikkerhet i høysetet

Bruker sitter godt fastspent med vognens 5-punktsbelte. Med støtteputene i setet, tilpasses setebredda og sikrer at brukeren sitter stabilt med bekket. Myke hodestøtteputer gir både komfort, beskyttelse og hjelper med å holde hodet sentrert.

Standard utstyr:

- Kalesje
- 5-punktsbelte
- Regntrekk
- Oppbevaringsbag
- Abduksjonskloss
- Støtteputer
- Joggereim
- 14" joggehjul



xRover i øvre tiltposisjon



xRover i nedre tiltposisjon

Testet og godkjent som sykkelvogn

xRover sitt sykkelfeste er konstruert med et kuleledd som gjør at det blir en naturlig fjæring på vognen i forhold til sykkelens bevegelser på forskjellig underlag. Sykkelvognen kommer med to fester til sykkel slik at man ikke er nødt til å demontere festet hvis en annen sykkel skal dra vognen. Sykkeldraget er utstyrt med en hjulskjerm. Skjermen hindrer vann, stein og annet i å komme på bruker i sykkelvognen selv om heldekkende utstyr ikke er påmontert vognen.

Etter en sykkeltur kan sykkeldraget felles inn under vognen, og et lite svinghjul kan vippes ned på frontakslingen. Da kan vognen manøvreres videre uten at bruker må overføres til en separat vogn eller stol, og man ikke har tatt med standard forhjul (joggehjul).

xRover leveres standard med en justerbar kjørebøyle og ledsagerbrems som kan låses slik at den fungerer som en parkeringsbrems.



Teknisk data

Modell:	Artikkelnr.:	HMS nr.:	Min. setebredde:	Maks. setebredde:	Benlengde:
xRover - S	501003	232330	26 cm	36 cm	60 cm
xRover - M	502002	230300	26 cm	36 cm	80 cm
xRover - L	503002	232331	26 cm	36 cm	105 cm


Modell:	Setedybde:	Min. rygghøyde:	Maks. rygghøyde:	Hjulstørrelse bak:	Hjulstørrelse foran:
xRover - S	25 cm	28 cm	42 cm	20"	14"
xRover - M	33 cm	36 cm	55 cm	20"	14"
xRover - L	45 cm	40 cm	60 cm	20"	14"

Modell:	Total bredde:	Total lengde:	Egenvekt:	Maks. brukervekt:
xRover - S	76 cm	118 cm	18,5 kg	44 kg
xRover - M	76 cm	138 cm	19,5 kg	80 kg
xRover - L	76 cm	163 cm	21,5 kg	120 kg

Tilbehør:

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse
202007		Håndvarmer for ledsager
201001	232329	Ryggesveke
201002	232313	Kjørebøyletaske
201003	230298	Bag til hjul
201004	232339	Sykkeldrag
201008	232337	6" svinghjul med alu.gaffel
201009	232312	Forlengt kjørebøyle
201010	232343	Venstrehåndsbremse
202001	232344	Vindtrekk str. S
203001	230299	Vindtrekk str. M
204001	230357	Vindtrekk str. L
202004	232345	Vinterpose str. S
203004	230302	Vinterpose str. M
204004	230360	Vinterpose str. L
202005	230298	Transportbag str. S
203005	230303	Transportbag str. M
204005	230361	Transportbag str. L
202006	232320	Myggnett str. S
203006	232321	Myggnett str. M
204006	232322	Myggnett str. L
101001	232338	Sykkelcomputer
10310	145121	Standard kjørepose lammeull, str. Senior
10320	145122	Standard kjørepose lammeull, str. Medium
10330	192364	Standard kjørepose lammeull, str. Junior
10340		Standard kjørepose lammeull, str. Barn 2
10350		Standard kjørepose lammeull, str. Barn 1
SOS80069		Sternumstøtte neopren str 1 (S)
SOS80070		Sternumstøtte neopren str 2 (M)
SOS80071		Sternumstøtte neopren str 3 (L)
SOS80072		Sternumstøtte neopren str 4 (XL)

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse
SOS80011		Sternumstøtte neopren str 0 (XS)
SOS80073		Sternumstøtte smal neopren str 2 (M)
SOS80074		Sternumstøtte smal neopren str 3 (L)
SOS80075		H-sele neopren str 1 (XS)
SOS80076		H-sele neopren str 2 (S)
SOS80077		H-sele neopren str 3 (M)
SOS80078		H-sele neopren str 4 (L)
SOS80079		H-sele neopren str 5 (XL)
SOS10454		Brystbelte neopren str Small
SOS10455		Brystbelte neopren str Medium
SOS10456		Brystbelte neopren str Large
SOS10457		Brystbelte neopren str Xlarge
SOS10508		Poziflex Brystbelte neopren str XS
SOS10509		Poziflex Brystbelte neopren str S
SOS10510		Poziflex Brystbelte neopren str M
SOS10511		Poziflex Brystbelte neopren str L
SOS10512		Poziflex Brystbelte neopren str XL
SOS10490		Skriftsele skai str 1 (S)
SOS10491		Skriftsele skai str 2 (M)
SOS10492		Skriftsele skai str 3 (L)
SOS10493		Skriftsele skai str 4 (XL)
SOS80087		Fotreim nylon m sidespenne str 1 (S)
SOS80088		Fotreim nylon m sidespenne str 2 (M)
SOS80089		Fotreim nylon m sidespenne str 3 (L)
SOS80090		Fotreim nylon m sidespenne str 4 (XL)
SOS80031		2-pkt. hoftebelte nylon m/foveis stramming str 1 (XS)
SOS80062		2-pkt. hoftebelte nylon m/foveis stramming str 2 (S)
SOS80032		2-pkt. hoftebelte nylon m/foveis stramming str 3 (M)
SOS80033		2-pkt. hoftebelte nylon m/foveis stramming str 4 (L)
SOS80034		2-pkt. hoftebelte nylon m/foveis stramming str 5 (XL)
SOS80064		4-pkt. hoftebelte nylon m/foveis stramming str 1 (XS)
SOS80065		4-pkt. hoftebelte nylon m/foveis stramming str 2 (S)
SOS80066		4-pkt. hoftebelte nylon m/foveis stramming str 3 (M)
SOS80067		4-pkt. hoftebelte nylon m/foveis stramming str 4 (L)
SOS80068		4-pkt. hoftebelte nylon m/foveis stramming str 5 (XL)

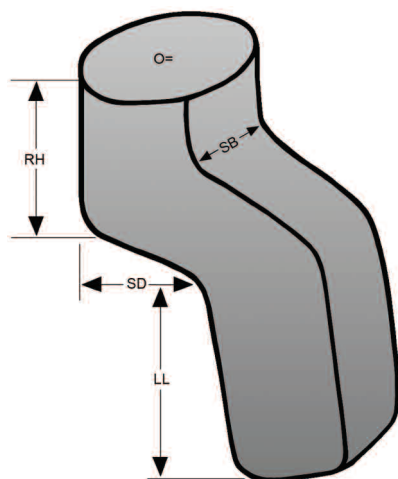

Posisjoneringstilbehør kan også leveres i nylon og skai.

Teknisk data på kjørepose

Benevning	Senior	Medium	Junior	Barn 2	Barn 1
Rygghøyde (RH)	47 cm	42 cm	40 cm	30 cm	26 cm
Setebredde (SB)	45 cm	40 cm	35 cm	32 cm	30 cm
Setedybde (SD)	49 cm	46 cm	45 cm	36 cm	28 cm
Legglengde (LL)	50 cm	44 cm	45 cm	38 cm	20 cm
Omkrets (O)	150 cm	140 cm	130 cm	105 cm	92 cm

xRover joggevogn er CE-merket.



Aktivitetshjelpemidler for barn, unge og voksne